


精確な結果と容易なコンプライアンス

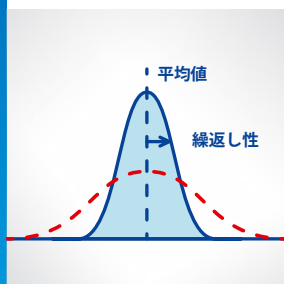

すべてのサンプルタイプで

精確な計量結果

高速のハロゲンによる加熱と、0.001%の水分含有量最小表示による優れた計量性能により、信頼性と繰返し性の高い水分率測定の結果が得られます。



安全性とプロセス管理の向上


複数のユーザーを個別のアクセス権とともに定義します。ゼロ点調整の結果と自動ロックアウトオプションにより、SOPと規制に準拠しながら効率の向上が可能です。



内蔵の試験メソッドによる

性能の確保

使用場所でのFACT、SmartCal、加熱/計量部の試験など、統合された日常点検機能によって機器は常に最適な動作を確保できます。

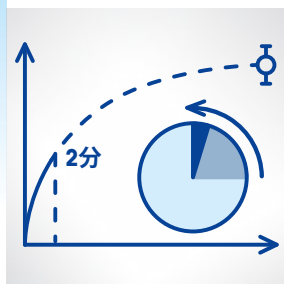

結果の予測による測定時間の短縮

組み込まれたQuickPredict™機能により、通常の測定時間の数分の1の時間で水分率測定の結果を予測することができます。この結果、より素早い意志決定が可能になり、詳細な分析/プロセスのステップをスピードアップできます。



HX204

ハロゲン水分計

加熱源から切り離された、水分含有量の最小表示が0.001%の高性能計量セルを備えているため、水分含有量が非常に低い場合でも水分率測定で最高の結果が得られます。メソッドの柔軟性により、研究、品質管理、プロセス中管理のあらゆるサンプルについて信頼性の高い結果が得られます。統合された日常点検と品質管理機能が、最適な機器性能の確保と規制の準拠に役立ちます。

HX204の特長:

- 統合されたメソッド開発のサポート
- 素早く簡単な清掃
- ネットワーク接続
- 水平調整
- シンプルなシステム統合と自動化
- オーダーメイドのレポート作成
- ID管理
- 管理限界値

HX204 ハロゲン水分計



高精度のハロゲン加熱
素早く信頼性の高い結果

高性能MFR計量セル
最小表示: 0.1mg
正確な水分測定

懸架式計量皿

精度と繰返し性の向上、簡単な清掃

ステンレス製の平らな表面

清掃しやすく堅牢

FACTと電子式水平調整

機器性能の保証

結果の予測

結果が得られるまでの時間の短縮

ネットワークとプリンタの接続
柔軟なレポート作成とデータ転送

内蔵メソッドのサポート
信頼性の高い結果のための
シンプルなメソッド開発

技術データ

繰返し性	0.05% (2gサンプル時) 0.01% (10gサンプル時)
乾燥プログラム	標準、急速、緩速、ステップ
最小表示	0.1mg、0.001%MC
メソッドメモリ件数	300
保存結果数	3,000
推奨%MC	>0.01%
結果の表示	制御チャート、結果の概要、リアルタイム乾燥曲線、QuickPredict、A4ネットワーク印刷、サーバーへのエクスポート、ゼロ点調整結果 (オプション)
ID管理	10個のID (手動で入力/バーコードリーダー使用)
ユーザー管理	グループx10、ユーザーx30、自動ロックアウト機能
スイッチオフ基準	5個の自動、任意、時間指定 (1~480分)
乾燥温度	40~230°C (1°C単位)
点検と調整	自由に定義できる温度調整 (80~200°C) 第3の試験温度 (50~200°C) 内部 (FACT) /外部分銅点検 (0.1~200g)
表示モード	%MC、%DC、%AM、%AD、g、g/kg MC、g/kg DC、-%MC
インターフェイス	WiFi、Ethernet、USBデバイス/USBホスト (2)、RS232
ひょう量	201g
メソッド開発	メソッドウィザード、試験測定
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、チェコ語、ハンガリー語、ポルトガル語、中国語、日本語、韓国語、ポーランド語
ディスプレイ	7インチカラータッチスクリーン

水分計用アクセサリ

		品番
サンプルの取り扱い	使い捨てアルミ皿	00013865
	ファイバーパット	00214464
品質管理	水分計温度調整キット - HX/HS/HC	30020851
	校正済み分銅100g - HX/HS/HC	30406400
その他アクセサリ	保護カバー HX/HS	30822726
	換気口フィルター用取替フィルター HX/HS	30020838
	バーコードリーダー (USB)	30417466
	サポートスタンドHX/HS	30018474
	プリンタホルダーHX/HS	30066692
	EasyDirect Moisture (データ収集ソフトウェア)	30522676

SmartCal™検査用物質

	品番
SmartCalスターターパック	30005917
cSmartCalスターターパック (認証済み)	30005918
SmartCal (12コ入り)	30005792
cSmartCal12 (認証済み、12コ入り)	30005793
SmartCal (24コ入り)	30005790
cSmartCal24 (認証済み、24コ入り)	30005791

▶ www.mt.com/smartcal

Mettler-Toledo GmbH
Laboratory Weighing
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel. +41 44 944 22 11
Fax. +41 44 944 30 60
Subject to technical changes.
© 03/2023 Mettler-Toledo GmbH
Global MarCom RITM1009145 KA

メトラー・トレド株式会社
ラボテック事業部
東京都台東区池之端2-9-7
池之端日殖ビル6F
Tel. 03-5815-5515
Fax. 03-5815-5525
© 1/2019 Mettler-Toledo K.K.,
30019644B
製品仕様は予告なく変更することがあります。

www.mt.com/moisture

詳細はこちらへ